

Luz para exames TruLight™ 1000

Grande variedade de aplicações



Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom


Luz para exames TruLight™ 1000: valor e flexibilidade

As lâmpadas halógenas ficaram para trás. Agora, você pode desfrutar de todos os benefícios da tecnologia LED em seu foco para exames, que incluem maior intensidade luminosa, vida útil mais longa, redução de geração de calor e consumo mínimo de energia. Além disso, os braços de suporte especialmente equilibrados e o leve refletor fazem com que seja fácil posicionar a luz para exames TruLight™ 1000.



Iluminação: tecnologia de ponta

Com a tecnologia LED, a o foco para exames TruLight™ 1000 oferece não apenas maior intensidade, mas também qualidade superior de luz quando comparada com luzes halógenas convencionais. A luz é distribuída de forma ideal pela exclusiva matriz multi-lente da Trumpf Medical, que fornece qualidade de luz homogênea em área e profundidade, para uma melhor visualização durante exames e procedimentos simples.

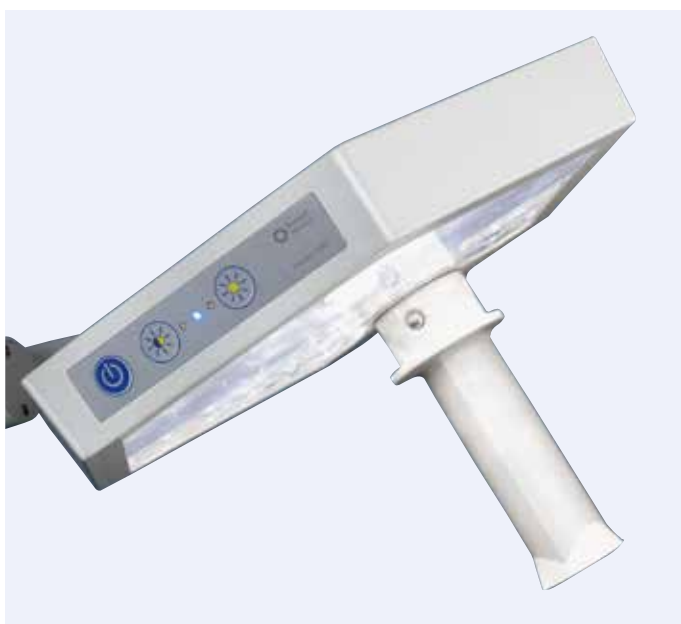

Manuseio: simples, flexível, conveniente

Com braços de suporte especialmente equilibrados que são muito leves, o foco para exames TruLight™ 1000 é fácil de ser posicionada. Além disso, com o puxador esterilizável, ela é adequada para aplicações em que a higiene é fundamental. Tudo o que você poderia querer em termos de conforto e flexibilidade.



Eficiência de energia: potência com economia

Nosso sistema de iluminação oferece vantagens persuasivas em relação a luz halógena tradicional, o que inclui uma vida útil significativamente maior, menos geração de calor, maior confiabilidade e baixo consumo de energia.



O lugar: em todos os lugares

O foco para exames TruLight™ 1000 está disponível em versões fixadas no teto, fixadas na parede e móveis. Com sua alta flexibilidade e design compacto que economiza espaço, ela é necessária em consultórios médicos, ambulatórios, e exames hospitalares e salas de parto, assim como em áreas de preparação e recuperação. Pense nele como um "Foco multiuso".

Dados técnicos	TruLight™ 1000
Nível de iluminação E_c a 1 m (lx)	80.000
Tamanho padrão (d10) a 1 m (cm) (polegadas)	ca. 16 6.3"
Temperatura da cor (K)	4.500
Índice de reprodução de cor (Ra)	95
Vida útil média dos LEDs (h)	>50.000

Os valores estão sujeitos a uma tolerância geral da indústria de $\pm 10\%$.



Conheça todos os nosso focos cirurgicos em:
www.trumpfmedical.com/en/products/surgical-lights/

A Hill-Rom é uma empresa líder em tecnologia médica, em nível global, com mais de 10 mil funcionários em todo o mundo. Fazemos parcerias com profissionais da saúde em mais de 100 países, em todas as configurações de assistência, com foco em soluções de cuidados do paciente que melhoram os resultados clínicos e econômicos em cinco áreas de destaque: **Mobilidade avançada, Tratamento e prevenção de ferimentos, Monitoramento e diagnóstico de pacientes, Segurança e eficiência cirúrgicas e Saúde respiratória.** Nossas inovações asseguram que os cuidadores tenham os produtos que precisam para diagnosticar, tratar e proteger seus pacientes, acelerar suas recuperações e gerenciar suas condições. **Todos os dias, ao redor do mundo, melhoramos os resultados para os pacientes e seus cuidadores.** Saiba mais em hill-rom.com.

A Trumpf Medical faz parte da Hill-Rom e se destaca pelos padrões elevados de engenharia alemã, oferecendo produtos inovadores para melhorar a eficiência e a segurança no centro cirúrgico, UTI e em outros ambientes clínicos por todo o setor de saúde. Tendo as exigências de nossos clientes como referência e a inovação como o fundamento de nosso sucesso, a Trumpf Medical entrega todas as soluções que atendam suas necessidades de cuidados clínicos.

Este documento é destinado exclusivamente a profissionais da saúde. Os dispositivos médicos mostrados neste catálogo são para uso em pacientes, nos departamentos de estabelecimentos da saúde.

Esses produtos de saúde são regulados de acordo com as regulamentações aplicáveis e possuem a marca CE. A Hill-Rom recomenda uma leitura atenta das instruções detalhadas para o uso seguro e adequado, incluídas nos documentos que acompanham os dispositivos médicos. Os funcionários das unidades de saúde são responsáveis pelo uso e manutenção adequados destes dispositivos médicos.

TruLight™ é uma marca comercial registrada da TRUMPF GmbH+ Co. KG.

A Hill-Rom reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, o design, as especificações e os modelos. A única garantia do produto indicada pela Hill-Rom é a garantia expressa por escrito, estendida na venda ou no aluguel de seus produtos.

©2018 Hill-Rom Services, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
Doc. N°: 2070359, 11 de julho de 2018

Os produtos/itens opcionais podem não estar disponíveis em todos os países. Para mais informações sobre nossos produtos e serviços, fale com o representante local da Trumpf Medical ou acesse nossa página da Web:

www.trumpfmedical.com

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom