

## CME Móvel solução 70

para continuidade no reprocessamento de instrumentais durante a renovação do CME



# CME Móvel solução 70

A solução da Steelco capaz de processar até 70.000 STU (unidade de esterilização) por ano, com o mais alto padrão, mantendo os custos de construção, salário e reprocessamento de instrumentais dentro do orçamento.

**ÁREA SUJA**  
Pré-lavagem ultrasônica  
Carregamento de Lavadoras



**ÁREA LIMPA**  
Mesas de empacotamento




**ÁREA ESTÉRIL**  
Descarregamento de esterilizantes



**ÁREA LIMPA**  
Carregamento de esterilizantes



**ÁREA LIMPA**  
Descarregamento de Lavadoras

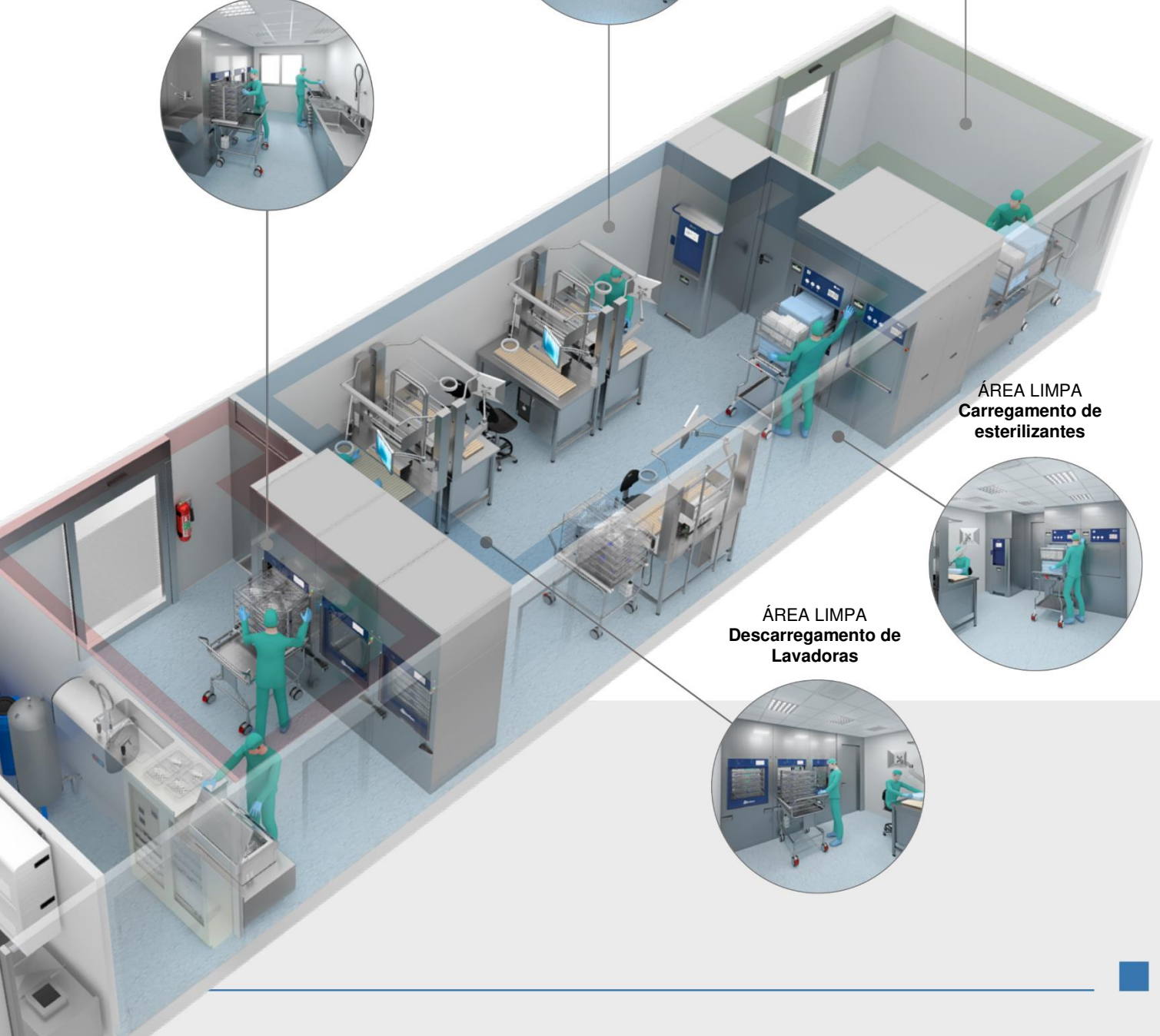



## O desafio de oferecer **continuidade no reprocessamento de instrumentais durante obras**

Obras no departamento de CME dos hospitais podem afetar a estabilidade do fornecimento instrumentais reprocessados em termos de higiene, qualidade, tempo e custo.

No passado, os hospitais podiam escolher as seguintes opções:

**Terceirização temporária do reprocessamento de instrumentais:** a terceirização completa do reprocessamento de instrumentais corre o risco de sofrer diminuição da qualidade e interrupção do fornecimento de conjunto de instrumentais para as salas de cirurgia e alas hospitalares. Ao mesmo tempo, funcionários ainda devem ser pagos.

**Melhorias graduais sem interrupção do trabalho ou uma solução provisória em instalações alternativas:** melhorias geralmente demoram muito mais tempo quando o trabalho do departamento não é interrompido. Medidas locais necessárias para atender aos rigorosos requisitos de higiene (por exemplo, paredes de cortina à prova de poeira) são exigentes e colocam os funcionários do CME sob estresse considerável (por exemplo, barulho excessivo).

**Solução provisória em instalações pré-fabricadas:** um CME provisório terá que ser instalado e, posteriormente, desinstalado, o que envolve um grande esforço e tensão sobre todos os envolvidos. Em muitos casos, não é possível que as soluções provisórias sejam instaladas dentro de uma distância mínima dos centros cirúrgicos e alas hospitalares.

## A resposta da Steelco para suas necessidades temporárias: um único módulo CME, pré-fabricado, pronto pra uso

O CME Móvel da Steelco é um **CME completamente funcional e validado** para uso temporário.

Equipado com todas as instalações e equipamentos técnicos. O cliente é apenas responsável por fornecer materiais e serviços (água, eletricidades, conexões de esgoto) e insumos (produtos químicos de processamento, material de embalagem), assim como pessoal.



**UM ÚNICO DIA DE TRABALHO**  
O CME Móvel da Steelco pode ser instalado em um único dia de trabalho.

PRONTO  
EM **1**  
DIA




# O CME Móvel da Steelco é a escolha econômica certa

O benefício mais importante é que a **qualidade do reprocessamento continua sob o controle do hospital!**

Além disso, os funcionários do CME não ficam expostos ao estresse e restrições de um canteiro de obras.

O esforço geral por parte do hospital é largamente reduzido em comparação com qualquer outra opção, tanto em termos de carga de trabalho quanto de economia.

O custo de um CME móvel é consideravelmente mais baixo, até mesmo se levando em conta o período de aluguel e os custos de transporte, instalação, comissionamento e validação, em comparação com os valores de mercado por STU (unidade de esterilização) cobrados por empresas de terceirização de reprocessamento. O CME Móvel solução 70 se paga em um curto período.

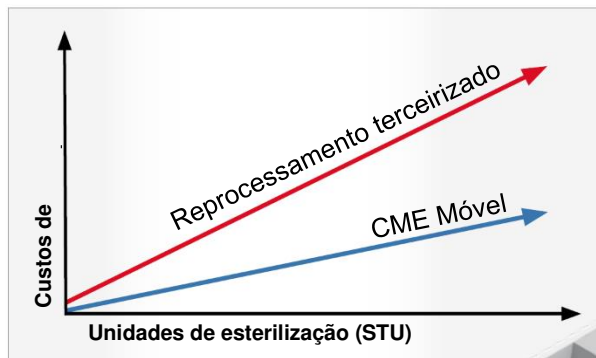

# Tecnologia de solução de alta qualidade perfeitamente adaptado para uma produtividade de até 16 unidades de esterilização por hora



## Lavagem ultrasônica (opção)

1 x unidade **Steelco US 80**  
Capacidade: **até 12 instrumentais canulados**

Excelentes resultados de limpeza com o efeito combinado da lavagem ultrasônica com o a tecnologia Active Flush da Steelco.



## Lavagem Automática

3 x unidade **Steelco PWD 8626**  
Capacidade: **15/18 DIN 1/1 bandejas**



Eficiência e produtividade incomparáveis. As lavadoras incluem racks modulares do Sistema de Carregamento Flexível e a Tecnologia de Lavagem Power Pulse para a redução da pré-lavagem manual de instrumentos complexos.



## Esterilização por Vapor **4D SENSOR**

2 x unidades **Steelco VS G2 8/ 8**  
Capacidade: **8 STU**

Equipado com as opções Eco mais avançadas para aumentar a eficiência e produtividade. Esterilizadores incluem o Sensor 4D único da Steelco para monitorar a saturação do vapor e penetração de cada carga de esterilização.




## Esterilização Vapor H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

1 x unidade **Steelco PL 130/2**  
Capacidade: **148 litros**

Esterilizador de cartucho de injeção única de baixa temperatura que permite ampla flexibilidade em ciclos de dispositivos médicos reutilizáveis genéricos até instrumentos flexíveis de canal triplo de 2200 mm de comprimento, com diâmetros de canal de 0,5 mm.

## Acessórios Disponíveis:

Ar Condicionado, Pré-tratamento de Água, Área de Pré-lavagem manual com opção de **tratamento Ultrassônico**, **Mesas de embalagem** com 5 alturas ajustáveis.

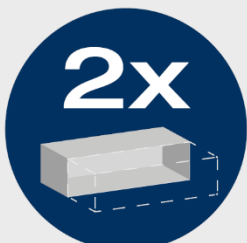

## VERSÃO DUPLA

A capacidade de produção pode ser customizada. Duas unidades móveis combinadas podem fornecer capacidade dupla de produção, isto é 140.000 STU por ano.



**Miele** Membro do Grupo

ARES - sistema de reprocessamento automatizado de endoscópio flexível



Desinfetantes de lavadoras dentárias

Desinfetantes de lavagem

Autoclaves de esterilização a vapor



Lavadoras desinfetantes para centrais de materiais e esterilização

Desinfetantes de lavagem de vidraria de laboratório



Sistemas de lavagem e esterilização para ciências biológicas e aplicações farmacêuticas

Sede

### STEELCO S.p.A.

Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - ITÁLIA  
Tel. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528  
info@steelcogroup.com  
www.steelcogroup.com

Filiais

**STEELCO ÁSIA**  
Puchong, Malásia  
info-asia@steelcogroup.com

**STEELCO ÁUSTRIA**  
Wals-Siezenheim, Áustria  
info-at@steelcogroup.com

**STEELCO BÉLGICA**  
Mollem, Bélgica  
info-be@steelcogroup.com

**STEELCO BENELUX**  
Vianen, Países Baixos  
info-benelux@steelcogroup.com

**STEELCO CHINA**  
Xangai, China  
info-cn@steelcogroup.com

**STEELCO FRANÇA**  
Paris, França  
info-fr@steelcogroup.com

**STEELCO ALEMANHA (Região DACH)**  
Gütersloh, Alemanha  
info-de@steelcogroup.com

**STEELCO HUNGRIA**  
Budapeste, Hungria  
info-hu@steelcogroup.com

**STEELCO MÉXICO**  
CDMX, México  
info-mx@steelcogroup.com

**STEELCO NÓRDICA**  
Kgs. Lyngby, Dinamarca  
info-nordic@steelcogroup.com

**STEELCO NORUEGA**  
Nesbru, Noruega  
info-no@steelcogroup.com

**STEELCO ESPANHA**  
Madri, Espanha  
info-es@steelcogroup.com

**STEELCO SUÍÇA**  
Spreitenbach, Suíça  
info-ch@steelcogroup.com

**STEELCO EUA**  
West Palm Beach, EUA  
info-usa@steelcogroup.com