



**Hillrom™**




## **CAMA COM GRADES LATERAIS INDEPENDENTES CENTURIS™ PRO**

Uma solução econômica para um cuidado de qualidade

# RECURSOS E BENEFÍCIOS

- **AutoContour™ e SlideGuard™** diminuem o deslocamento do paciente na cama, reduzindo a compressão abdominal durante a articulação da cama
- O **Line-Of-Site™ backrest indicador** de fácil identificação auxilia na implementação de protocolos pelos profissionais de saúde
- Baixe as **grades laterais independentes** com apenas uma mão através de um mecanismo veloz e suave de movimentação das grades que possibilita um acesso rápido ao paciente
- As alças laterais de apoio estão posicionadas ergonomicamente para propiciar **maior estabilidade ao paciente na saída da cama**
- O **bloqueio funcional dos controles** proporciona melhor segurança operacional
- Carga de Trabalho Segura de 220 Kg que permite acomodar com conforto e segurança uma maior variedade de pacientes
- Os **rodízios de 150 mm, incluindo o rodízio direcional**, permitem realizar as manobras de movimentação da cama com maior facilidade
- O freio centralizado proporciona maior segurança para o paciente
- Os controles integrados ou a opção de controle pendente de mão, simplificam para os profissionais de saúde o acionamento dos comandos da cama

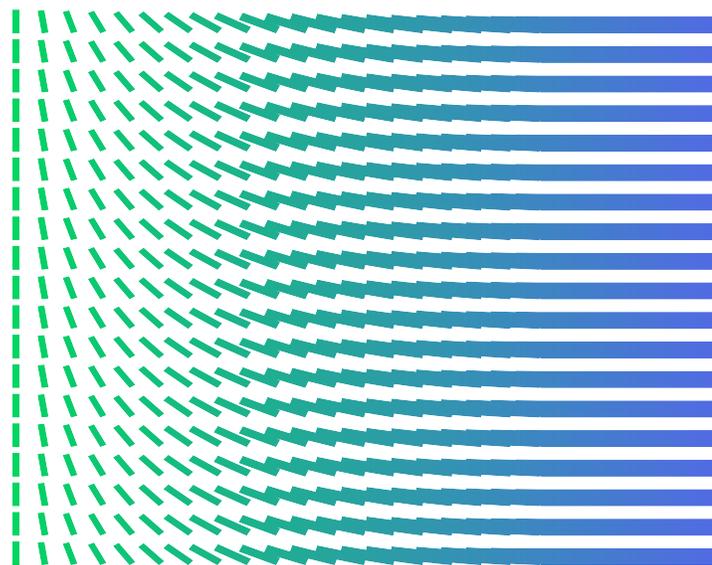

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Carga de Trabalho Segura		220 kg
Peso da cama		133 kg
Regulação de altura		39 a 77 cm
Deslizamento do encosto SlideGuard		up a 12 cm
Classe de proteção		IPX4
Ângulos da cama	Seção da cabeceira	0 a 65°
	Seção de Pernas	0 a 28°
	Seção dos pés	-22 a -3°
	Trendelenburg/Trendelenburg Reverso	-17 a +17°
Estrado	Largura	90 cm
	Comprimento	200 cm
Altura da grade lateral		39.3 cm
CPR mecânico bilateral		●
Rodízio direcional	Na extremidade da cabeceira	●
	Na extremidade dos pés	○
Rodízios	150 mm	●
Controles	Pendente ou embutido nas grades laterais	●
Freio central		na extremidade dos pés
Encaixe para suporte de soro e de trapézio		nas 4 quinas
Extensão de cama e suporte de roupa de cama		○
Tensão Bivolt		100-240V AC

● = padrão ○ = opcional

### Controles integrados



### Line-Of-Site™



### Liberação da grade lateral com apenas uma mão



A Hill-Rom é uma empresa global líder em tecnologia médica, cujos produtos, serviços e mais de 10.000 de funcionários em todo o mundo ajuda as pessoas a obter melhores cuidados dentro e fora do hospital. Nossas inovações em cinco áreas centrais – Avanço em Mobilidade, Prevenção e Cuidado de Feridas, Monitoramento e Diagnóstico de Paciente, Segurança e Eficiência Cirúrgica e Saúde Respiratória – melhoram resultados clínicos e financeiros e asseguram que os profissionais de saúde em mais de 100 países tenham os produtos que precisam para proteger os pacientes, acelerar recuperações e lidar com condições. Todos os dias, ao redor do mundo, nós melhoramos resultados para pacientes e profissionais de saúde. Saiba mais em [hill-rom.com](http://hill-rom.com).

**Contate seu Representante Hillrom ou visite nosso site**  
[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com) para mais informações

**hillrom.com**

A Hill-rom reserva-se o direito de fazer alterações sem aviso prévio em design, especificações e modelos. A única garantia que a Hill-rom faz é a garantia expressa por escrito estendida na venda ou aluguel de seus produtos. Verifique com seu representante de vendas local da Hillrom para validar a disponibilidade ou registro em cada país.