



Hillrom™




CAMA COM GRADES LATERAIS INDEPENDENTES HILLROM® 900

Melhore a segurança. Simplifique as tarefas

RECURSOS E BENEFÍCIOS

- Baixe as **grades laterais independentes** com apenas uma mão através de um mecanismo veloz e suave de movimentação das grades que possibilita um acesso rápido ao paciente
- As alças laterais de apoio estão posicionadas ergonomicamente para propiciar maior estabilidade ao paciente na saída da cama
- Os **controles intuitivos** da cama implicam mínimo treinamento da equipe e ajudam a minimizar o risco de erro do usuário
- **A Saída Lateral com um toque** posiciona a cama para uma saída da cama fácil e segura
- **AutoContour™ e SlideGuard™** diminuem o deslocamento do paciente na cama, reduzindo a compressão abdominal durante a articulação da cama
- **EasyChair™ e a função de posição plana** oferecem ao paciente a capacidade de encontrar rapidamente uma postura sentada confortável
- **O indicador de altura baixa** avisa ao profissional de saúde se a cama não está na altura mais baixa, contribuindo com um ambiente mais seguro para o paciente
- **O 5° rodízio** viabiliza movimentar a cama com facilidade em qualquer direção
- **A função Shock Positioning com um toque** nivela a parte superior e coloca a cama em posição de Trendelenburg, em caso de ocorrência de complicações com o paciente
- **A Luz noturna inteligente** aumenta a segurança operacional, tanto para os pacientes como para os profissionais de saúde
- Alerta ao profissional de saúde sobre uma potencial saída da cama por meio do **Alarme de Saída da Cama de 3 Modos**, disponível com a funcionalidade de monitoramento remoto*

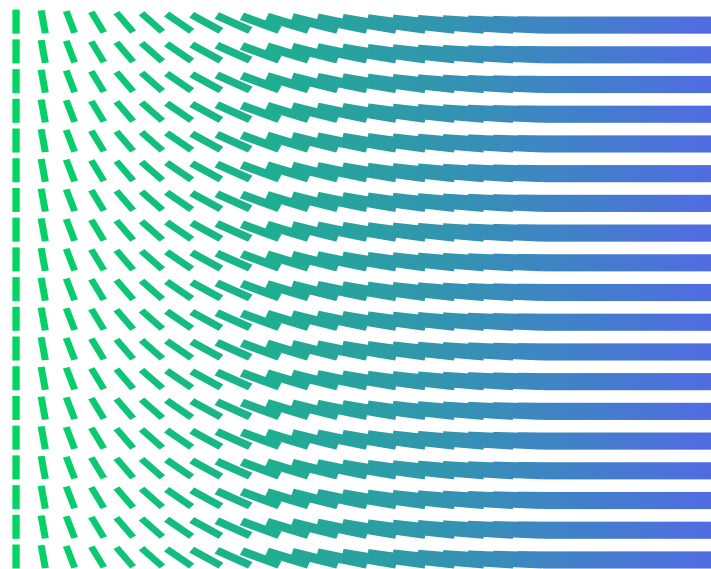

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


HILL-ROM 900 ELITE

Carga de Trabalho Segura	220 kg	●
	250 kg	○
Peso da cama		144 kg
Regulação de altura		38.9 a 76.8 cm
Deslizamento do encosto SlideGuard		até 12 cm
Classe de proteção		IPX4
Ângulos da cama	Seção da cabeceira	0 to 65°
	Seção de Pernas	0 to 28°
	Seção dos pés	- 22 to -3°
	Trendelenburg/Trendelenburg Reverso	-17 to +17°
Estrado	Largura	90 cm
	Length	200 cm
Material da plataforma de dormir		Laminado de Alta Pressão (HPL)
Altura da grade lateral		39.3 cm
Rodízios	125 mm duplo **	○
	150 mm duplo	○
Rodízio direcional	Na extremidade da cabeceira	●
	Na extremidade dos pés	○
5° rodízio		○
Pedais de freio e direção	Na extremidade dos pés	●
	Na extremidade dos pés e da cabeceira**	○
Indicador de freio não engatado		○
Alarme de Saída da Cama de 3 Modos		○
Chamada de enfermagem		○
Controles	Pendente	○
	Embutidos nas grades laterais	●
	Controle no braço flexível **	○
	Pendente na extremidade dos pés para o profissional de saúde	○
	Controle de pé bilateral alto-baixo	○
Seção da cabeceira	Móvel	●
	Fixa	○
Indicador de freio não engatado **		●
EasyChair™ e função de posição plana		●
Luz noturna inteligente **		○
OneTouch Shock positioning **		○
Extensão de cama com suporte de roupa de cama		○
Tensão Bivolt		100-240V AC

** Disponível apenas em conjunto com as opções selecionadas.
Para mais informações, por favor entre em contato com um representante local da Hill-rom.

● = padrão ○ = opcional

LUZ NOTURNA INTELIGENTE OPCIONAL

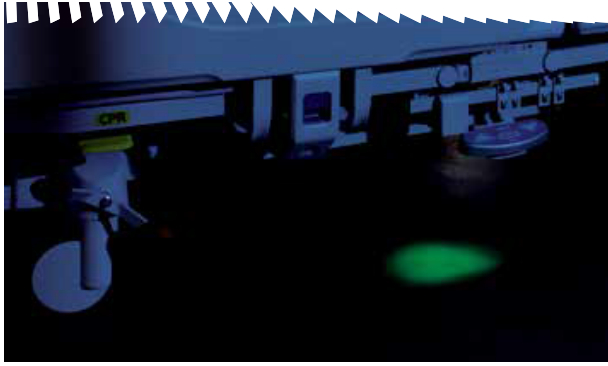

ALARME DE SAÍDA DA CAMA DE 3 MODOS



RODÍZIOS DUPLOS DE 125 MM OPCIONAIS**




CONTROLE DE PÉ BILATERAL ALTO-BAIXO COM BLOQUEIO AUTOMÁTICO E 5º RODÍZIO DIRECIONAL OPCIONAIS



ALÇAS E CONTROLES INTEGRADOS PARA O PROFISSIONAL DE SAÚDE



INDICADOR DE ALTURA BAIXA E POSICIONAMENTO PARA SAÍDA LATERAL COM UM TOQUE

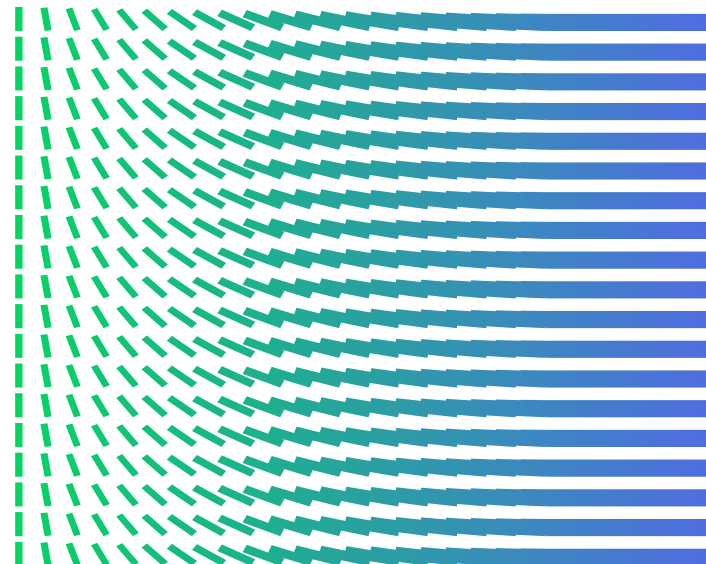

RECURSOS PADRÃO ADICIONAIS

- Alavanca mecânica bilateral para CPR
- 6 pontos de fixação para restrição do paciente
- Encaixe para suporte de soro e de trapézio
- Suporte bilateral para acessórios
- Suporte para cabos elétricos
- Fixadores ajustáveis para superfície
- Bateria
- Grades das extremidades removíveis (Verificar con consultores clínicos traducción de endboards como bordas das extremidades)
- Line-of-Site e indicadores de Trendelenburg
- Posicionamento para Saída Lateral com Um Toque
- Freio central
- Indicador para necessidade de serviço

A Hill-Rom é uma empresa global líder em tecnologia médica, cujos produtos, serviços e mais de 10.000 de funcionários em todo o mundo ajuda as pessoas a obter melhores cuidados dentro e fora do hospital. Nossas inovações em cinco áreas centrais – Avanço em Mobilidade, Prevenção e Cuidado de Feridas, Monitoramento e Diagnóstico de Paciente, Segurança e Eficiência Cirúrgica e Saúde Respiratória – melhoram resultados clínicos e financeiros e asseguram que os profissionais de saúde em mais de 100 países tenham os produtos que precisam para proteger os pacientes, acelerar recuperações e lidar com condições. Todos os dias, ao redor do mundo, nós melhoramos resultados para pacientes e profissionais de saúde. Saiba mais em hill-rom.com.



A Hill-Rom está comprometida com o conceito de que a mobilização precoce de pessoas e o apoio à sua independência melhora a vida – no hospital e em casa.

**Contate seu Representante Hillrom ou visite nosso site
www.hillrom.com para mais informações**

hillrom.com

A Hill-rom reserva-se o direito de fazer alterações sem aviso prévio em design, especificações e modelos. A única garantia que a Hill-rom faz é a garantia expressa por escrito estendida na venda ou aluguel de seus produtos. Verifique com seu representante de vendas local da Hillrom para validar a disponibilidade ou registro em cada país.